

ERGO
CONCEPT

ERGO
09 L 2.0

LA NUOVA POLTRONA
ERGOCONCEPT
MULTI-POSIZIONE
COMPATTO, INNOVATIVO,
LEGGERO



Manuale
D'USO

PRECAUZIONI

Prima di tutto, il team ErgoConcept desidera ringraziarvi per la fiducia che ci avete accordato acquistando il modello **Ergo 09L 2.0**. Abbiamo dato il meglio di noi stessi per la vostra nuova sedia vi porta una completa soddisfazione. Se lo desiderate, vi invitiamo a contattarci all'indirizzo: contact@ergoconcept.net per comunicarci eventuali commenti positivi o negativi.

Si prega di leggere la presente guida nella sua interezza PRIMA DI QUALSIASI UTILIZZO. ErgoConcept declina ogni responsabilità per danni alle persone o ai beni nel caso in cui la sedia a rotelle non sia stata utilizzata nel più stretto rispetto della presente guida.

In questa guida, gli avvertimenti sono indicati da pittogrammi, si prega di fare riferimento alle indicazioni qui sotto per comprendere al meglio i punti di attenzione particolare.



AVVERTIMENTO!

Questo pittogramma indica una situazione potenzialmente pericolosa che, se non evitata, potrebbe provocare gravi danni fisici con conseguenti lesioni o morte.



DIVIETO!

Questo pittogramma indica un divieto che, se non rispettato, potrebbe portare a una situazione potenzialmente pericolosa, con conseguenti danni fisici.



ATTENZIONE!

Questo pittogramma indica una situazione potenzialmente pericolosa che, se non evitata, potrebbe provocare danni fisici lievi o moderati



ACCOMPAGNAMENTO

Questo pittogramma indica una situazione potenzialmente pericolosa che può provocare danni fisici se l'utente non è accompagnato.



PUNTO DI VIGILANZA

Questo pittogramma indica che è necessaria particolare attenzione durante la manipolazione del prodotto. In caso contrario, potrebbero verificarsi conseguenze materiali per la sedia a rotelle e una durata di vita ridotta del prodotto

SOMMARIO

I / SPECIFICHE DEL PRODOTTO 4

II / ASSEMBLAGGIO DELLA SEDIA 6

1. Installazione del joystick7

2. Connessioni cavi posteriori7

3. Cuscino del sedile7

4. Installazione e rimozione delle batterie8

6. Installazione della cintura di sicurezza.....12

7. Nel portabicchieri12

III / METODO DI APERTURA E PIEGATURA DELLA SEDIA 13

IV/ IMPOSTAZIONI DEI COMPONENTI..... 14

1. Regolazione in lunghezza dei poggiatesta14

2. Joystick14

3. Schienale15

4. Braccioli.....16

5. Commuta dalla modalità manuale alla modalità elettrica17

6. Clip N'Go18

V / METODO DI CONTROLLO E MANIPOLAZIONE..... 19

VII / MANUTENZIONE E TEST..... 24


VI / CONSIGLI GENERALI PER LA SICUREZZA..... 25

VII/ POSSIBILI MALFUNZIONAMENTI..... 30

IX/ PARAMETRI TECNICI 31

XI/ GARANZIA E SERVIZIO POST-VENDITA..... 32

I / SPECIFICHE DEL PRODOTTO

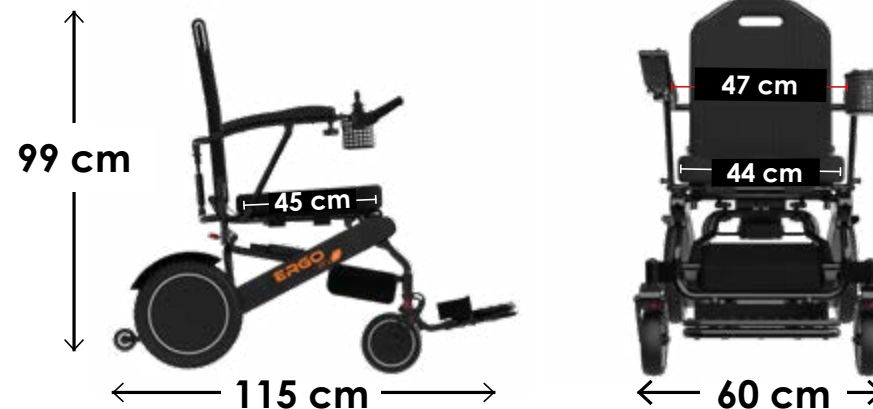

Modello	ERGO 09L 2.0
Dimensioni aperte (LxIxA)	1150 x 600 x 990 mm
Dimensioni piegate (LxIxA)	600 x 340 x 810 mm
Carico massimo	160 kg
Motore	2 x 250W
Batteria	2 x 24V 6AH - LITHIUM
Autonomia	25 km
Ruote anteriori	175 x 50 mm - 12 pollici - Ruote piene
Ruote posteriori	325 x 55 mm - 7 pollici - Ruote piene
Pendenza max.	8°
Tempo di ricarica della batteria	6-8 ore
Spazio tra i bracciali	470 mm
larghezza della sedile	440 mm
Profondità della seduta	450 mm
Altezza della seduta	avanti: 550 mm / schienale: 520 mm
Raggio di sterzata	800 mm
Conduzione	Trazione posteriore
Sistema di frenatura	Freni elettromagnetici
Peso netto (senza la batteria)	30 kg
Peso senza Clip N'Go senza batteria	17 kg
Peso totale con batteria	33 kg

Dimensioni piegate

- A: 81 cm
- l: 34 cm



II / ASSEMBLAGGIO DELLA SEDIA



- Disimballare la sedia dai vari cartoni e plastiche protettive
- Assicurarsi che non rimangano pezzi sul fondo dell'involucro di plastica prima di eliminarlo
- Fare riferimento alla sezione sull'apertura della sedia e aprirla

Nella custodia sotto il sedile troverai i seguenti oggetti:

- Sedia E09L 2.0
 - Joystick
 - Caricabatteria
 - Batterie (x2)
 - Kit di strumenti
 - Portabicchieri
 - Cintura di sicurezza
 - Cuscino di seduta
 - Manuale d'uso
 - *Interasse larghezza bracciolo (opzionale)*
- Installare il joystick all'estremità del bracciolo desiderato, regolarlo alla lunghezza desiderata e avvitarlo con la rotella situata sotto il bracciolo destro. Per collegare il joystick alla presa superiore della batteria, consigliamo di passarla attraverso le cinghie di tensione dello schienale.
 - Verificare che i collegamenti sul retro della sedia siano corretti
 - Posizionare il cuscino sul sedile
 - Sgombri le ruote posteriori dalle plastiche di protezione
 - Inserire i poggiatesta nei tubi orizzontali
 - Installare la cintura di sicurezza
 - Inserire le batterie

Quando la poltrona è completamente aperta e collegata, seguire le istruzioni riportate di seguito per una prima esperienza di successo con la poltrona. Consigliamo anche di controllare la pressione dei pneumatici anteriori in quanto questo ha un impatto importante sulla maneggevolezza della sedia a rotelle.

- Caricare la batteria al massimo dal primo utilizzo

1. Installazione del joystick

Installare il joystick sull'estremità del bracciolo desiderato, regolarlo alla lunghezza desiderata e avvitarlo con la rotella sotto il bracciolo destro e collegare il cavo del joystick.



2. Connessioni cavi posteriori

Verificare che i collegamenti sul retro della poltrona siano corretti: entrambi i cavi provenienti dai servomotori devono essere collegati al modulo di alimentazione.



3. Cuscino del sedile

Installare il cuscino e lo schienale forniti.

Orientare il cuscino del sedile in modo che la parte posteriore del sedile e il velcro nella parte inferiore del sedile.

Il cuscino si allinea con il velcro sul sedile.



4. Installazione e rimozione delle batterie

Installare le batterie

Basta infilare le batterie nelle guaine su entrambi i lati della sedia a rotelle fino a quando le batterie non sono completamente all'interno.



Rimuovere le batterie

Tirare il pulsante sulla custodia della batteria, allo stesso tempo rimuovere la batteria.



Istruzioni per la ricarica della batteria

- È obbligatorio utilizzare solo il caricabatterie al litio fornito da ErgoConcept con il vostro ERGO 09L 2.0. **L'uso di qualsiasi altro caricatore è severamente vietato.**
- Collegare il caricabatterie alla presa sul joystick, assicurarsi che la connessione sia corretta. Questo caricherà le 2 batterie contemporaneamente.
- L'altra parte del caricabatterie deve essere collegata a una presa elettrica
- Il LED rosso indica che le batterie sono cariche
- Il LED verde indica che le batterie sono completamente ricaricate
- Fare attenzione a non utilizzare la sedia durante la ricarica della batteria quando è posizionata nella custodia.
- Assicurarsi che il caricabatterie e la batteria non si surriscaldino durante la ricarica della batteria, altrimenti potrebbero verificarsi danni o infiammazione.
- Il tempo di ricarica medio è compreso tra 2 e 8 ore, fare attenzione a non lasciare il caricabatterie collegato per un lungo periodo di tempo, si consiglia vivamente di scollegare quando la batteria è completamente carica.
- Il caricabatterie deve essere protetto da contatto con acqua o muffa, o urti violenti.



Non caricare continuamente per più di 6 ore tramite la porta di ricarica del controller per evitare sovraccarichi quando due batterie sono inserite su entrambi i lati del telaio. Non caricare mai più di 3 ore quando c'è solo una batteria su entrambi i lati del telaio.

La tua sedia a rotelle E09L 2.0 viene fornita con batterie, che dovrebbero durare circa 25 km in condizioni di funzionamento normali. Si consiglia di utilizzare la sedia a rotelle elettrica E09L 2.0 fino a quando le batterie sono completamente scariche per ottenere una migliore durata della batteria.

- **Non utilizzare caricabatterie, marche e tipi diversi quando si sostituisce la batteria.** La batteria originale deve essere sostituita e tutte le batterie esistenti devono essere sostituite insieme. Non mescolare il vecchio e il nuovo.
- Gli elettrodi positivi e negativi della batteria non possono essere collegati con oggetti conduttori come il metallo, che può causare un cortocircuito o una scossa elettrica.
- Tenere lontano da materiali infiammabili. Non avvicinarsi o esporre al calore, come fiamme libere o scintille. Durante il trasporto delle batterie, non posizionarle con materiale infiammabile o combustibile.
- È vietato smontare la batteria senza autorizzazione.
- Non è consentito cortocircuitare la batteria o accendere il fuoco per evitare incidenti di esplosione.
- Lasciare la sedia a rotelle ricaricata per 6 ore a piena carica. Quando la spia verde è accesa significa che le batterie sono completamente cariche.

Primo metodo di caricamento

Collegare il caricabatterie direttamente al joystick:



Spia del caricabatterie

Colore **VERDE** indica che è **completamente carica**.

ROSSO: la batteria è in fase di ricarica.

Secondo metodo di caricamento

È anche possibile caricare direttamente la batteria collegando il caricabatterie senza passare attraverso il joystick.



6. Installazione della cintura di sicurezza

In caso di incidente, la cintura di sicurezza terrà saldamente l'utente al sedile per limitare eventuali lesioni personali.

Regolare la cintura di sicurezza alla lunghezza appropriata, non essere troppo stretta, causando disagio.

Premere il pulsante della fibbia per staccare.

7. Nel portabicchieri

Inserire il portabicchiere nel tubo del bracciolo opposto al joystick, fissarlo saldamente con il pulsante.



III / METODO DI APERTURA E PIEGATURA DELLA SEDIA

Apertura della sedia

Aprire prima il poggiatesta.

Tenere la parte superiore dello schienale con una mano, l'altra mano tiene l'estremità anteriore del sedile.

Entrambe le mani si ripiegano finché « clic » risuona per aprire completamente la sedia a rotelle.



Piegatura della sedia

Premere il pulsante rosso con una mano e spingere la parte superiore dello schienale in avanti.

Con l'altra mano, tenere la parte superiore del telaio dello schienale con una mano e l'altra mano,

Avvicinare il sedile al sedile.

Piegare il poggiatesta.



IV/ IMPOSTAZIONI DEI COMPONENTI

1. Regolazione in lunghezza dei poggipiedi

Il poggipiedi regolabile ha tre posizioni di estensione. Per regolare il poggipiedi su una lunghezza comoda, tirare i due pistoni laterali per liberare il poggipiedi e quindi tirarlo in avanti. Assicurarsi che entrambi i pistoni siano bloccati nella nuova posizione.



2. Joystick

Il supporto del joystick ha diverse posizioni per regolarne la lunghezza. Fissare il joystick e la sua staffa nel tubo destro o sinistro situato sotto il.

Con la manopola sotto questo tubo, è possibile far scorrere il supporto nel tubo e scegliere la posizione corretta del joystick



14

3. Schienale

Lo schienale dell'Ergo 09L 2.0 è regolabile in inclinazione.

Tirare verso l'alto il cilindro situato sul retro dello schienale.

Allo stesso tempo, tenere il telaio superiore dello schienale con una mano e spingere verso il basso.

Rilasciare il cilindro quando si raggiunge l'inclinazione desiderata dello schienale.



Torna alla posizione iniziale della cartella

Tirare la leva del cilindro verso l'alto.

Continuare a premere la leva finché lo schienale non ritorna automaticamente all'angolo originale.



15

4. Braccioli

4.a/ Escamotage

Per entrare lateralmente, tirare il pulsante di sblocco del braccio e sollevare il bracciolo verticalmente per fornire lo spazio richiesto.



4.b/ Regolazione in larghezza

Su Ergo 09L 2.0 è possibile ampliare lo spazio tra i 2 braccioli per aumentare la dimensione tra bracciolo da 47 cm a 51 cm. Per questo, è necessario aggiungere dei distanziatori (opzionali).

Per modificare la larghezza della poltrona, nella borsa del bracciolo troverete il kit di fissaggio necessario.



Larghezza tra braccioli
+ 4cm



con distanziatore




senza distanziatore

5. Commuta dalla modalità manuale alla modalità elettrica

Per funzionare, i motori devono essere innestati e le leve rosse nella parte posteriore dei servomotori sollevate. La sedia funzionerà elettricamente, ma non potrà essere spinta da terzi.

Per mettere la sedia a rotelle E09L 2.0 in modalità coasting, arrestare completamente e spegnere il motore.

Premere le due leve rosse su ciascun motore come indicato:

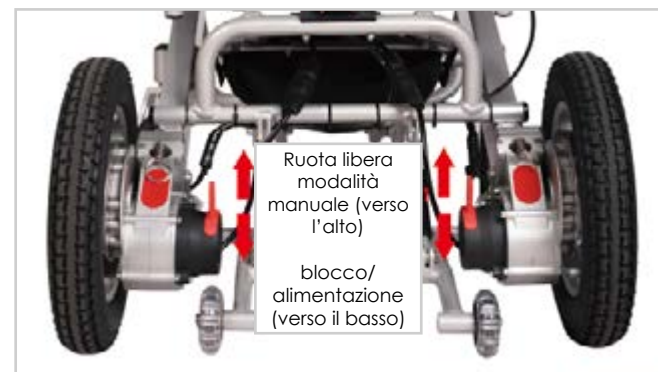

6. Clip N'Go

Per liberare le ruote posteriori, scollegare prima i cavi di collegamento rapido sul retro del modulo di alimentazione.



Rimuovere il perno di bloccaggio e far scorrere le ruote orizzontalmente dalla piastra di bloccaggio.




Inverti questi passaggi per riavvolgere le ruote prima di utilizzare la tua sedia a rotelle E09L 2.0

V / METODO DI CONTROLLO E MANIPOLAZIONE



Descrizione del menu dello schermo

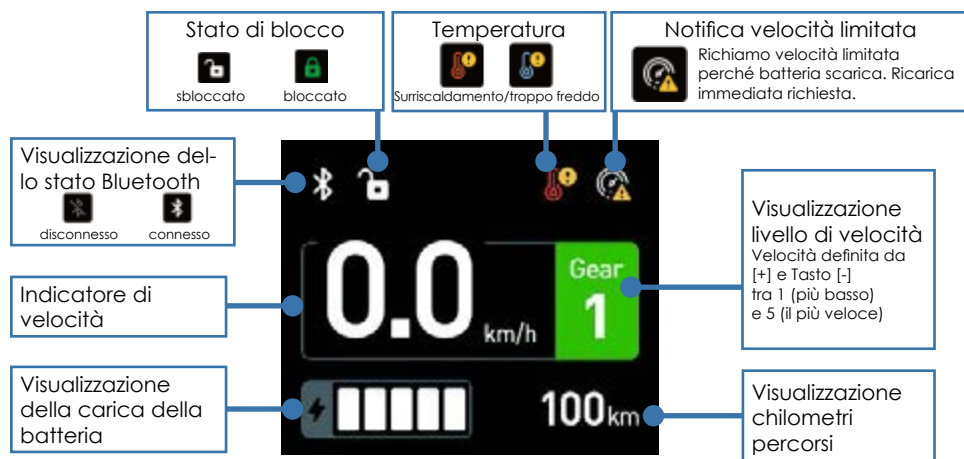

Premere il tasto sinistro o destro per 5 secondi per selezionare la pagina desiderata. 3 pagine disponibili in totale:



Pagina principale

La prima pagina visualizzata quando si accende il



Pagina codice QR

Scansiona il codice per ottenere informazioni, come ID del dispositivo



Pagina informazioni sulle attrezzature

Visualizza le informazioni del dispositivo ID e versione del firmware

Batteria scarica


L'ultima barra dell'indicatore della batteria diventa gialla. Nell'angolo in alto a destra viene visualizzata l'icona di avviso del limite di velocità

Carica esaurita

L'icona di avviso del limite di velocità nell'angolo in alto a destra si accende quando la batteria è scarica.

Stato di carica

L'icona verde lampeggia in verde continuamente durante la ricarica della batteria.

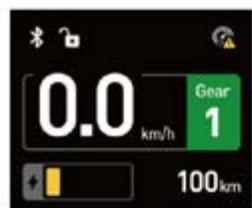

Pop-up di richiamo di difetto



Richiamo del codice di errore, fare riferimento alla pagina «Guastierisoluzione dei problemi» per la causa e la soluzione.

Se non riuscite a risolvere il problema, si prega di contattare immediatamente il servizio post-vendita.

Istruzioni principali di guida

Andare avanti:

Premere leggermente il joystick in avanti

Fermare:

Rilasciare il joystick

Per tornare indietro:

Premere leggermente indietro il joystick. (l'utente deve fare evidenza di particolare attenzione ad anticipare i movimenti all'indietro ed evitare collisioni)

Voltare :

Premere leggermente il joystick verso destra o sinistra. (l'utente dovrà prestare particolare attenzione ad anticipare i movimenti lato ed evitare collisioni)

Guidare in curva:

Premere leggermente il joystick nella direzione della curva con una velocità adeguata

Come evitare e aggirare gli ostacoli: premere leggermente il joystick per evitare e aggirare gli ostacoli. Adattare la tua velocità per la situazione.

Ulteriori informazioni

- Maggiore è l'ampiezza della spinta, maggiore è la velocità della sedia sarà importante
- Rilasciare il joystick per fermare la sedia
- Premere il pulsante rosso 0 per spegnere la sedia.
- Se è necessario spingere la sedia, assicurarsi di rilasciarla il freno motore inclinando le levette rosse poste su ciascuna delle ruote posteriori



PUNTO DI VIGILANZA

Fare un piccolo passo:

Guidare lentamente la sedia verso il gradino e tenere il joystick in avanti mentre si attraversa. Il gradino non deve superare i 3 cm di altezza.

Guida in salita:

Il corpo deve essere leggermente inclinato in avanti per mantenere il baricentro in avanti e guidare ad una velocità adeguata. L'inclinazione della pendenza non deve superare i 10°.

Entrare e uscire dall'ascensore:

L'utente deve prestare particolare attenzione all'intervallo di tempo di apertura e chiusura delle porte dell'ascensore al fine di evitare eventuali collisioni durante l'entrata o l'uscita dall'ascensore.

Traffico sui marciapiedi:

In città è obbligatorio circolare sui marciapiedi, è vietato circolare su strade o strade. Per attraversare è necessario utilizzare gli attraversamenti pedonali.

Attraversamenti pedonali:

Per attraversare le strade, utilizzare gli attraversamenti pedonali. Prestare particolare attenzione quando si guidano barche con marciapiede.

VII / MANUTENZIONE E TEST

- 1 - L'utente deve controllare regolarmente le viti e i dadi (ogni 6 mesi). Se i giunti sembrano allentati, assicurarsi di avvitarli saldamente per garantire un uso sicuro.
- 2 - Verificare la buona fluidità di rotazione delle ruote anteriori e posteriori (sganciate). Se la resistenza è troppo elevata, sostituire il cuscinetto a sfera.
- 3 - Controllare che le gomme, i braccioli e altre parti in plastica non siano troppo usurate. Se è così, sostituirle.
- 4 - Verificare che i collegamenti e connettori elettrici non siano ossidati, in caso contrario occorre sostituirli.
- 5 - Assicurarsi che i giunti meccanici-avvitati siano funzionali, se sembrano troppo lenti o presentano un problema di incastro o sganciamento, sostituire i.
- 6 - La sostituzione dei singoli elementi deve essere effettuata da un riparatore professionale, autorizzato da ErgoConcept o dal servizio di manutenzione ErgoConcept. Non sostituirli da soli.

Istruzioni per la ricarica della batteria

- È obbligatorio utilizzare solo il caricabatterie al litio fornito da ErgoConcept con il vostro ERGO 09L 2.0. **L'uso di qualsiasi altro caricatore è formalmente vietato.**
- Collegare il caricabatterie alla presa sul joystick, assicurarsi che la connessione sia corretta
- L'altra parte del caricabatterie deve essere collegata a una presa elettrica
- Il LED rosso indica che le batterie sono cariche
- Il LED verde indica che le batterie sono completamente ricaricate
Fare attenzione a non utilizzare la sedia a rotelle durante la ricarica della batteria quando è inserita nella custodia.
- Assicurarsi che il caricabatterie e la batteria non si surriscaldino durante la ricarica della batteria, altrimenti potrebbero verificarsi danni o infiammazione.
- Il tempo di ricarica medio è compreso tra 2 e 8 ore, fare attenzione a non lasciare il caricabatterie collegato per un lungo periodo di tempo, si consiglia vivamente di scollegare quando la batteria è completamente carica.
- Il caricabatterie deve essere protetto da contatto con acqua o muffa, o urti violenti.

VI / CONSIGLI GENERALI PER LA SICUREZZA



AVVERTIMENTO

- L'utente deve dimostrare di possedere la capacità di giudizio e di giudizio necessaria per utilizzare la sedia in modo sicuro, nonché la capacità di controllare e controllare la sedia.
- L'utente deve leggere il presente manuale di istruzioni PRIMA dell'uso e conservarlo in caso di necessità.
- Ci sono componenti elettronici nel joystick, evitare di premere i pulsanti quando il joystick è spento.
- Attenzione a non lasciare la poltrona sulle guaine laterali della batteria, perché potrebbe danneggiarla.
- L'utente deve eseguire tutte le procedure descritte in questo manuale.
- Non tentare mai di superare un ostacolo più alto di 40 mm.



PUNTO DI VIGILANZA

- Non è consentito riporre la poltrona in un ambiente troppo caldo o troppo freddo, poiché ciò potrebbe ridurre la durata della poltrona. Evitare di conservare la batteria in un luogo troppo caldo, a rischio di infiammazione.
- Ci sono componenti elettronici nel joystick, evitare di premere i pulsanti quando è spento.
- Attenzione a non lasciare la poltrona sulle guaine laterali della batteria, perché potrebbe danneggiarla.


ATTENTION

- Durante l'installazione sul sedile non appoggiarsi mai direttamente al joystick ma utilizzare il bracciolo.
- Fare attenzione a non danneggiare il cavo elettrico della batteria quando lo si scollega.
- Assicurarsi che il cavo che collega il joystick alla batteria sia inserito nelle piccole clip situate lungo i braccioli per evitare qualsiasi rischio di danneggiamento.
- È vietato l'uso della sedia in stato di ebbrezza.
- L'utente deve comprendere e conoscere le caratteristiche e le funzionalità specifiche della sedia ed esercitarsi ripetutamente su un pavimento piano e sicuro prima dell'uso quotidiano.
- Durante il periodo di familiarizzazione con le funzioni della sedia, l'utente deve essere accompagnato da una persona competente.
- Durante la chiusura e l'apertura, non inserire mai le mani o le dita nel sistema di chiusura della sedia.


ATTENZIONE

DIVIETO

ACCOMPAGNAMENTO
1 - Passaggio a livello:

È assolutamente vietato attraversare i binari senza essere accompagnati da persona competente. Attraversare un gradino troppo alto può causare incidenti di ribaltamento e lesioni gravi.

2 - Guida in pendenza:

La guida su una superficie con pendenza superiore al 10% (in salita o in discesa) può provocare ribaltamenti e lesioni gravi. Se la situazione lo richiede, è obbligatoria la presenza di un accompagnatore competente quando si viaggia su fondi ripidi.

3 - Passaggi di attraversamento:

Superare un gradino troppo alto può causare incidenti di ribaltamento e gravi lesioni personali. Se la situazione lo richiede, è obbligatoria la presenza di un accompagnatore competente durante l'attraversamento dei gradini.

4- Semafori:

L'utilizzatore della sedia a rotelle deve prestare particolare attenzione al tempo impiegato dal semaforo per cambiare colore. La mancata osservanza di questo punto può provocare gravi lesioni personali. Se la situazione lo richiede, è obbligatoria la presenza di un accompagnatore competente durante l'attraversamento delle strisce pedonali.

5 - Pericoli legati all'utilizzo di batterie scariche:

Il guasto della batteria dovuto alla mancata ricarica può verificarsi quando l'utente attraversa la strada e causare gravi incidenti. Se la situazione lo richiede, è obbligatoria la presenza di un accompagnatore competente durante l'attraversamento delle strisce pedonali.

6 - Entrare e alzarsi dal letto:

Manovre inadeguate quando l'utente sale o scende dal letto possono causare gravi danni fisici. Se la situazione lo richiede, è obbligatoria la presenza di un accompagnatore competente per salire e scendere dal letto se la situazione lo richiede.

7 - Riparazione:

All'utente (o a qualsiasi persona non autorizzata) è vietato riparare da soli la propria sedia a rotelle; ciò potrebbe causare danni permanenti alla sedia a rotelle e causare gravi lesioni personali. Ciò invalida anche tutte le forme di garanzia del produttore. La sedia deve essere riparata da un riparatore professionista autorizzato o dal servizio di manutenzione ErgoConcept.

8 - Sicurezza dei bambini:

È assolutamente vietato lasciare che un bambino giochi con il prodotto, ciò potrebbe causare danni permanenti alla sedia e causare gravi lesioni personali. Ciò invalida anche tutte le forme di garanzia del produttore. La sedia deve essere conservata in un luogo inaccessibile ai bambini. È essenziale notare che la sedia non deve essere utilizzata come seggiolino per auto.

9 - Movimentazione:

È assolutamente vietato afferrare le batterie o la loro guaina per sollevare o spostare la sedia. Ciò può causare danni permanenti alla sedia e causare gravi lesioni personali. Le persone che sollevano o spostano la sedia devono afferrarla per il telaio.

10 - Pulizia:

Spruzzare acqua direttamente sulla sedia a rotelle elettrica può causare danni permanenti alla sedia a rotelle e causare gravi lesioni personali. Se necessario, pulire la sedia con un panno pulito e umido



DIVIETO

- Le batterie devono essere protette da qualsiasi contatto con acqua, umidità o muffe, questo può causare malfunzionamenti e cortocircuiti.
- Se si verifica un cortocircuito, potrebbe verificarsi un arco elettrico che potrebbe causare ustioni o incendi.
- Le batterie devono essere protette dal contatto con il fuoco o con forti fonti di calore, altrimenti potrebbero verificarsi un'esplosione o un incendio.
- È vietato smontare le batterie o sottoporle a urti violenti, ciò potrebbe causare l'accensione delle batterie o provocare un incendio.
- È vietato esporre le batterie ad un ambiente troppo caldo o estremamente freddo, poiché ciò potrebbe ridurre le prestazioni delle batterie o danneggiarle.
- Si consiglia vivamente di non lasciare le batterie sul ripiano posteriore del veicolo, ciò potrebbe incendiare le batterie o provocare un incendio.
- Se le batterie si surriscaldano, si deformano o emettono un odore insolito durante l'uso o la ricarica, è necessario interrompere immediatamente la ricarica o l'utilizzo, altrimenti le batterie potrebbero danneggiarsi o incendiarsi.
- In caso di perdita delle batterie, tenerle lontane da qualsiasi fonte incandescente o di calore, altrimenti ciò potrebbe causare l'incendio o l'esplosione delle batterie.
- Non lasciare mai che un bambino maneggi o giochi con le batterie e conservarle in un luogo inaccessibile ai bambini.
- Il caricabatterie e le batterie del kit di caricamento facile non devono essere coperti da un panno o da qualsiasi altro oggetto durante la ricarica. Devono essere collocati in un luogo fresco, asciutto e ben ventilato.
- Anche inutilizzate, le batterie agli Ioni di Litio hanno la particolarità di scaricarsi. Pertanto non dovrebbero essere conservati per lunghi periodi a basso carico, poiché ciò causerebbe una riduzione delle prestazioni.
- Se non vengono utilizzate per un lungo periodo di tempo, le batterie devono essere completamente ricaricate.
- Devono essere ricaricate almeno una volta ogni tre mesi, per preservarne le prestazioni.
- Le batterie agli ioni di litio sono riciclabili. Al momento della sostituzione delle batterie, l'utente restituirà le batterie Ergoconcept usate per il riciclaggio.

VII/ POSSIBILI MALFUNZIONAMENTI

NO	Problema	Cause	Soluzioni
1	Il sistema elettrico del poltrona non funziona	Il controller non è alimentato	Ricollegare il controller
		Il joystick non è alimentato	Ricollegare il joystick
		La carica della batteria non è sufficiente	Ricaricare la batteria
2	Segnale acustico quando si sposta la sedia a rotelle	La velocità massima è troppo bassa	Aumentare la velocità sul joystick
		I motori sono in fase di scarso	Sostituire i servomotori
3	L'autonomia chilometro calo	L'ambiente è molto freddo (temperature negative)	È una specificità delle batterie
		Guida su una superficie ripida o accidentata	Il consumo della batteria è logicamente più importante
		La capacità delle batterie diminuisce	Cambiare le batterie
4	Erreur lors du chargement de la batterie	La lumière sur le chargeur ne s'allume pas	Cambiare il caricatore
		La lumière sur le chargeur reste toujours allumée	Controllare la connessione batteria-joystick o cambiare la batteria
		Le temps de chargement de la batterie est très court	La capacità della batteria è bassa, cambiala

DEPOSITO DELLA SEDIA

Questo prodotto deve essere conservato in un ambiente fresco e asciutto.

Non conservarlo a temperature estreme. Se non può essere conservato nelle condizioni sopra descritte, potrebbe causare la ruggine della sedia a rotelle e danneggiare il sistema elettrico.

Se riscontri un problema, contatta il tuo rivenditore o distributore locale autorizzato per assistenza.

- Non è consentito riporre la poltrona in un ambiente troppo caldo o troppo freddo, poiché ciò potrebbe ridurre la durata della poltrona. Evitare di conservare la batteria in un luogo troppo caldo, a rischio di infiammazione.

- Ci sono componenti elettronici nel joystick, evitare di premere i pulsanti quando è spento.

- Attenzione a non lasciare la poltrona sulle fodere laterali della batteria, rischiando di danneggiare quest'ultima.

IX/ PARAMETRI TECNICI

Motore	Synchrone DC Motor
Voltage motore	24V
Potenza	2 x 250W
Batteria	Lithium Ion
Alimentazione di carica	AC220V, 50Hz
Potenza della batteria	2 x 6Ah
Voltage batteria	2 x 24V
Indicatore di tensione	LED



AVVERTIMENTO

1. Rischio di lesioni, caricare solo batterie ricaricabili tipo LI-ION 24V, gli altri tipi potrebbero esplodere. È obbligatorio utilizzare solo il caricabatterie al litio fornito da ErgoConcept. L'uso di qualsiasi altro caricatore è severamente vietato.
2. Gas esplosivi. evitare fiamme e scintille. garantire una ventilazione adeguata durante la carica.
3. Scollegare l'alimentazione prima di stabilire o scollegare i collegamenti alla batteria.
4. Prima di caricare leggere le istruzioni.

Indicazioni caricatore:

- LED verde: batteria carica
- LED rosso: batteria in carica

XI/ GARANZIA E SERVIZIO POST-VENDITA

Elément	Durée de garantie	Remarque
Telaio	2 anni	Danni non causati intenzionalmente secondo le linee guida di questa guida per l'utente.
Motore	2 anni	Danni non causati intenzionalmente secondo le linee guida di questa guida per l'utente.
Batteria al litio	2 anni	Danni non causati intenzionalmente secondo le linee guida di questa guida per l'utente.
Controller	2 anni	Danni non causati intenzionalmente secondo le linee guida di questa guida per l'utente.
Cavi elettrici	2 anni	Danni non causati intenzionalmente secondo le linee guida di questa guida per l'utente.

Per richiedere la garanzia del produttore sulla vostra sedia a rotelle E08L, è indispensabile contattare il vostro rivenditore, che si occuperà degli scambi con ErgoConcept.



Merci pour votre confiance

35 rue du petit bois
Bâtiment D
69440 Mornant
FRANCE

www.ergoconcept.net